


Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
ГНЦ СИ Гест-С.-Петербург

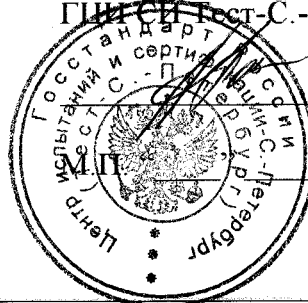

А.И.Рагулин

2000 г.

Гири СП Ia разряда (E1 по R111 OIML)	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>14849-01</u> Взамен № <u>14849-95</u>
---	--

Выпускаются по ТУ 4274-001-13173535-95.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гири СП Ia разряда применяются для поверки средств измерений массы в соответствии с государственной поверочной схемой по ГОСТ 8.021-84.

О П И С А Н И Е

Гири СП массой от 1 до 5 мг изготавливаются из алюминия, плотностью 2,65 кг/дм³, а гири массой от 10 до 500 мг - из нейзильбера, плотностью 8,7 кг/дм³, магнитная проницаемость материала не более 1,01.

Гири СП массой от 1 г до 10 кг изготавливаются из слабомагнитной стали аустенитного класса с магнитной проницаемостью не более 1,01 и плотностью 7,934...8,067 кг/дм³.

Шероховатость (Ra) поверхности гирь массой от 1 мг до 500 мг не более 0,2 мкм, массой от 1 г до 10 кг не более 0,06 мкм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальные значения массы гирь	1 мг...10 кг
Допускаемое отклонение массы гирь от номинального значения (в зависимости от массы):	
- при выпуске из производства	±0,002...5 мг
- при эксплуатации	±0,004...10 мг
Разряд по ГОСТ 7328-82	Ia
Класс точности по OIML R111	E1
Срок службы	не менее 10 лет
Условия эксплуатации::	
- температура окружающего воздуха, °С	20 ± 2
- относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на наружную поверхность крышки футляра и на паспорт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Гири СП Ia разряда поставляются в виде наборов и отдельных гирь.

Наборы гирь комплектуются по заказу: 1) 1 - 500 мг; 2) 1 мг - 5 г; 3) 1 мг - 100 г; 4) 1 мг - 200 г; 5) 1 мг - 500 г; 6) 1 мг - 1 кг; 7) 1 - 500 г; 8) 1 г - 1 кг; 9) 1 мг - 5 кг; 10) 1 г - 5 кг.

Комплект поставки:

- гиря СП (или набор гирь СП) - 1 шт.;
- футляр - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.;
- для отдельных гирь:
- перчатка для гирь массой 1, 2, 5 кг - 1 шт,
для гирь массой 10 кг - 2 шт.;
- для наборов гирь:
- пинцет - 1 шт.
- кисточка - 1 шт.
- перчатка для гирь массой более 200 г - 1 шт.

П О В Е Р К А

Поверка гирь СІ Іа разряда осуществляется по МИ 1747-87 "ГСИ. Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки".

Основное оборудование, необходимое для поверки:

- рабочий эталон единицы массы 0 разряда;
- весы Іа разряда.

Межповерочный интервал - 1 год.

Н О Р М А Т И В Н Ы Е И Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д О К У М Е Н Т Ы

ГОСТ 7328-82 "Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия".

Международные рекомендации OIML R111 "Гири классов точности E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3".

ТУ 4274-001-13173535-95 "Меры массы образцовые и общего назначения. Технические условия".

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Гири СІ Іа разряда соответствуют требованиям ТУ 4274-001-13173535-85, OIML R111, а также ГОСТ 7328-82 (за исключением маркировки, комплектности наборов и соотношения геометрических размеров гирь).

Изготовитель: ЗАО "Сартогосм".

192007 С.-Петербург, ул.Курская, 28/32.

Генеральный директор
ЗАО "Сартогосм"



Р.Д.Гркич

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.