


Приложение к свидетельству  
№ 9391 об утверждении типа  
средств измерений

Согласовано

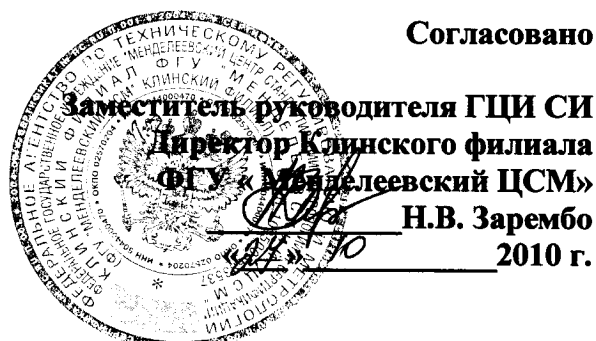

Стаканы с меткой и стаканы для отпуска напитков	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 7576-00 Взамен №
---	---

Стаканы с меткой вместимостью 50, 100, 150, 250 мл выпускаются по ТУ 25-11.944-79.  
Стаканы для отпуска напитков вместимостью 100, 200 мл выпускаются по ТУ 4324-003-07609129-99.

#### Назначение и область применения

Стаканы с меткой применяются в лабораториях и научно-исследовательских институтах для измерения объема жидкостей. Стаканы для отпуска напитков используются для отпуска напитков, готовых к продаже (молоко, пиво, минеральная вода, различные виды спиртных напитков) в кафе, ресторанах, барах, гостиницах.

#### -Описание

Стаканы с меткой имеют прямую цилиндрическую форму. Стаканы для отпуска напитков имеют коническую форму. На стаканы наносятся шкалы с соответствующими оцифрованными отметками.

#### Основные технические характеристики

Таблица 1

Наименование	Номинальная вместимость стаканов, мл	Оцифрованные отметки	Предел допускаемой абс. погрешности, мл	Габаритные размеры	
				Высота, мм	Диаметр дна, мм
Стаканы с меткой	50	25, 50	$\pm 2$	$75 \pm 2$	$40 \pm 1$
	100	50, 100	$\pm 2$	$90 \pm 3$	$45 \pm 2$
	150	50, 100, 150	$\pm 3$	$95 \pm 3$	$53 \pm 2$
	250	50, 150, 250	$\pm 3,5$	$95 \pm 3$	$67 \pm 3$
Стаканы для отпуска напитков	100	50, 100	$\pm 2,5$	$100 \pm 5$	$38 \pm 2$
	200	150, 200	$\pm 4$	$135 \pm 5$	$50 \pm 2$

#### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на этикетку типографским способом и на стаканы методом шелкографии.

## Комплектность

В комплект входят:

- Стаканы, шт. – по требованию потребителя ;
- этикетка;
- коробка из гофрокартона упаковочная.

## Поверка

Поверка стаканов производится по ГОСТ 8.234-77 «Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки».

Средства поверки: пипетка-рабочий эталон 1-го разряда; весы лабораторные среднего класса точности по ГОСТ 24104 .

Поверка проводится при выпуске из производства, периодической поверке стаканы не подлежат.

## Нормативные и технические документы

ТУ 4324-003-07609129-99- «Стаканы для отпуска напитков. Технические условия».

ТУ 25-11.944-79 – «Стаканы с метками. Технические условия».

ГОСТ 8.470- 82 - «Государственная поверочная схема для средств измерений объема жидкости».

## Заключение

Тип стаканов с меткой и стаканов для отпуска напитков утвержден с техническими и метрологическими - характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: ОАО «Химлаборприбор»; 141600, г.Клин, Московской области, ул.Папивина, д.3; телефон (49624) 2-47-41, 2-64-00; те./факс (49624) 2-35-48

Главный инженер  
ОАО «Химлаборприбор»



П.Н.Яковлев